


GUIDE D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir acheté le thermomètre **AccuflexPro⁺** de **Physio Logic[®]**.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Pour mieux comprendre le thermomètre **AccuflexPro⁺** veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

Ce thermomètre numérique fournit un relevé rapide et précis de la température corporelle d'un individu. Votre thermomètre possède un bout confortable et souple ainsi que des fonctions de mémoire et d'avertisseur sonore. Il sert à mesurer la température corporelle par voie buccale, rectale ou axillaire. Idéal pour un usage domestique ou professionnel, quel que soit l'âge de la personne.

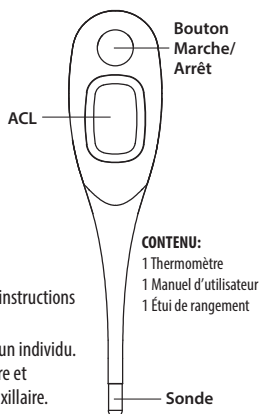

AVERTISSEMENTS :

NE PAS LAISSER UN ENFANT UTILISER CET APPAREIL SANS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

- Ne pas utiliser le thermomètre dans l'oreille. Conçu uniquement pour des relevés par voie buccale, rectale ou axillaire.
- L'utilisation de relevés de température aux fins d'autodiagnostic est dangereuse. Consulter votre médecin pour interpréter les résultats. Un autodiagnostic peut conduire à une aggravation de la maladie présente.
- Ne pas essayer de prendre des mesures lorsque le thermomètre est mouillé, car les relevés pourraient être imprécis.
- Ne pas mordre le thermomètre. Dans le cas contraire, le thermomètre pourrait se briser et causer des blessures.
- Ne pas essayer de démonter ou de réparer le thermomètre. Cela pourrait entraîner des lectures inexactes.
- Après chaque utilisation, désinfecter le thermomètre, surtout s'il est utilisé par plusieurs personnes.
- Ne pas forcer le thermomètre dans le rectum. Arrêter l'insertion lorsqu'une douleur est ressentie. Ne pas respecter cette consigne pourrait entraîner des blessures.
- Ne pas utiliser le thermomètre par voie buccale après l'avoir utilisé par voie rectale.
- Pour les enfants de deux ans ou moins, ne pas utiliser l'appareil par voie buccale.
- Si l'appareil a été entreposé à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C (41 °F – 104 °F), laissez-le à une température ambiante (5 °C – 40 °C; 41 °F – 104 °F) pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser.

Remarque : L'utilisation du couvercle de sonde peut entraîner un écart de 0,01 °C (0,02 °F) avec la température réelle.

PRÉCAUTIONS

La performance de l'appareil peut être affectée si l'une ou plusieurs des situations suivantes se produisent :

- Utilisation en dehors de la plage de température et d'humidité indiquée par le fabricant
- Entreposage en dehors de la plage de température et d'humidité indiquée par le fabricant
- Choc mécanique (par exemple, épreuve de chute) ou capteur détérioré
- Température du patient inférieure à la température ambiante
- Les émissions à radiofréquence portables et mobiles peuvent affecter l'appareil
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement de résonance magnétique

Prise de la température


Nettoyez et désinfectez le thermomètre **AccuflexPro⁺** conformément aux instructions présentes dans ce guide.

Configuration du mode de fonctionnement (orl / udr / rct / bth) : Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que l'écran ACL du thermomètre affiche « orl » et relâchez le bouton. Appuyez à nouveau sur **Marche/Arrêt** et ce, jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité s'affiche puis relâchez le bouton. Lorsque vous appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer l'appareil, il affichera le mode sélectionné.

Remarque : Boire des boissons chaudes ou froides, faire de l'exercice, fumer ou réaliser d'autres activités peut faire monter ou baisser la température. Il est important que le patient se détende pendant environ cinq minutes, bouche fermée, avant de prendre la température.

Utilisation buccale (188.8°C) → -- °C

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le thermomètre. L'appareil émettra un bip, affichera la dernière température enregistrée, puis affichera le mode de mesure, dans ce cas « orl ». Ensuite, le thermomètre entrera en mode test et affichera trois tirets avec le symbole Celsius ou Fahrenheit.
2. Placez le bout de la sonde sous la langue aussi près que possible d'une des poches de chaleur comme indiqué dans la **Figure 2**. Évitez de bouger l'appareil.
3. Une série de bips indiqueront que le pic de température est atteint.

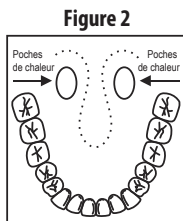

Utilisation rectale (188.8°C) → -- °C

Remarque : Les mesures de température rectales sont une méthode appropriée et fiable pour les nourrissons et les jeunes enfants. Autrement, cette méthode ne doit être utilisée que lorsqu'il est impossible ou peu pratique de prendre une température par voie orale ou axillaire.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le thermomètre. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le thermomètre. L'appareil émettra un bip, affichera la dernière température enregistrée, puis affichera le mode de mesure, dans ce cas « rct ». Ensuite, le thermomètre entrera en mode test et affichera trois tirets avec le symbole Celsius ou Fahrenheit.
2. Lubrifiez le bout en argent de la sonde avec de la gelée de pétrole pour une insertion facile. Insérez doucement le capteur de 1 cm (moins de 1/2 po) dans le rectum.
3. Une série de bips indiqueront que le pic de température est atteint.

Utilisation axillaire (188.8°C) → -- °C

1. Essayez l'aisselle avec une serviette sèche.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le thermomètre. L'appareil émettra un bip, affichera la dernière température enregistrée, puis affichera le mode de mesure, dans ce cas « udr ». Ensuite, le thermomètre entrera en mode test et affichera trois tirets avec le symbole Celsius ou Fahrenheit.
3. Placez le bout de la sonde sous l'aisselle de façon à ce qu'elle soit en contact avec la peau et que le thermomètre soit perpendiculaire au corps. Maintenir le bras fermement appuyé le long du corps pour que la pointe de la sonde soit bien couverte par l'aisselle. De cette façon, la sonde n'est pas affectée par l'air ambiant.
4. Une série de bips indiqueront que le pic de température est atteint.

Utilisation pour le bain (188.8°C) → L °C

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le thermomètre. L'appareil émettra un bip, affichera la dernière température enregistrée, puis affichera le mode de mesure, dans ce cas « bth ». Ensuite, le thermomètre entrera en mode test et affichera « Lo » avec le symbole Celsius ou Fahrenheit clignotant.
2. Placez la pointe de la sonde dans l'eau du bain jusqu'à ce que le thermomètre émette un bip indiquant que la température maximale est atteinte.

Remarque :

1. Si le relevé de température est inférieur à **32°C ou 90°F**, l'écran ACL affichera « Lo ».
2. Si le relevé de température est supérieur à **42,9°C ou 109,2°F**, l'écran ACL affichera « Hi ».
3. Pour prolonger la durée de vie de la pile, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le thermomètre une fois le relevé effectué. En l'absence de mesure, il s'éteindra automatiquement après environ 10 minutes.

Commutable °C/°F

Les relevés de température sont disponibles en Celsius ou en Fahrenheit (situés dans le coin supérieur droit de l'écran ACL). L'échelle de l'AccuflexPro+® est réglée en Celsius par défaut. Pour changer l'échelle en Fahrenheit, appuyer et relâcher le bouton **Marche/Arrêt**. Lorsque l'écran affiche la dernière prise de température, maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé jusqu'à ce que le « C » apparaisse, puis appuyer à nouveau pour choisir l'échelle désirée.

Instructions relatives au nettoyage et à la désinfection

Avant et après chaque utilisation, essuyer le thermomètre plusieurs fois avec un chiffon doux propre et de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol à 75 %.

Pour éviter d'endommager le thermomètre :

- 1. Ne pas le stériliser à l'eau bouillante, ni au gaz, ni à la vapeur
- 2. Ne pas l'immerger ni le faire tremper dans de l'alcool ou de l'eau chaude
- 3. Ne pas effectuer de nettoyage ultrasonique pour nettoyer le thermomètre
- 4. Ne pas utiliser de benzène, de diluant, d'essence ou d'autres solvants puissants pour le nettoyer.

Pour les taches tenaces, essuyer le thermomètre avec un chiffon propre imbibé d'eau ou de solution détergente neutre. Finir en l'essuyant avec un chiffon doux et sec.

L'utilisation de toute autre solution ou méthode de nettoyage non conforme aux instructions mentionnées peut entraîner des problèmes de fiabilité et annule la garantie pour ce thermomètre.

Soins généraux	
1. Nettoyer le thermomètre avant et après chaque utilisation.	5. Ne pas échapper le thermomètre et éviter les chocs.
2. Le ranger dans son boîtier de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.	6. Ne pas essayer de démonter le thermomètre.
3. Ne pas mordre le thermomètre.	7. Il ne doit être utilisé que sous la supervision d'un adulte.
4. Ne pas le ranger dans un endroit où il sera exposé directement à la lumière du soleil, à la poussière ou à l'humidité. Éviter les températures extrêmes.	8. Ne pas marcher, courir ou parler pendant la prise de température.

Dépannage		
Message d'erreur	Problème	Solution
Lo	Le relevé de température est inférieur à 32 °C (90 °F)	Éteignez le thermomètre, attendez une minute et prenez une nouvelle lecture en suivant le guide de l'utilisateur.
Hi	La température prise est supérieure à 42,9 °C (109,2 °F)	Éteignez le thermomètre, attendez une minute et prenez une nouvelle lecture en suivant le guide de l'utilisateur.
Er 1	Le thermomètre a bougé pendant la prise la température	Reprenez la température. Restez immobile lorsque vous prenez une lecture.
Er 2	Le temps de mesure dépasse 10 secondes	Le bout de la sonde peut ne pas avoir refroidi, veuillez attendre 30 secondes entre chaque mesure. Le thermomètre a bougé en prenant la température. Attendez 30 secondes et reprenez la température. Restez immobile lorsque vous prenez une lecture. Boire des liquides chauds ou froids, faire de l'exercice, fumer ou effectuer d'autres activités peut augmenter ou diminuer votre température. Il est important de se détendre pendant environ 5 minutes, la bouche fermée, avant de prendre une autre lecture.
Err	Le système ne fonctionne pas correctement.	Contactez l'équipe du service à la clientèle d'AMG au : 1 800-363-2381 .

 **Mise au rebut**

La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations locales relatives à la mise au rebut de produits électroniques.

Spécifications du produit

Type	Thermomètre numérique
Plage de mesure :	32 °C – 42,9 °C (90 °F – 109,2 °F)
Précision :	± 0,1 °C (± 0,2 °F) de 35,5 °C à 42,0 °C (95,9 °F à 107,6 °F) Sous une plage de fonctionnement de 18 °C à 28 °C (64,4 °F à 82,4 °F) ± 0,2 °C (± 0,4 °F) pour les autres mesures et plages de fonctionnement
Mode de fonctionnement :	Mode prédictif : buccale, rectale, axillaire – Mode direct : bain
Écran :	Écran à cristaux liquides, 3,5 chiffres
Mémoire :	Dernière mesure
Pile :	Une pile bouton de 3.0 V DC, Taille CR2032
Durée de la pile :	Environ 200 heures de fonctionnement continu ou un an à trois mesures par jour
Dimensions :	13,4 cm x 3,1 cm x 1,6 cm (L x P x H)
Poids :	Environ 23 grammes, pile incluse
Durée de vie estimée :	Trois ans
Plage de fonctionnement :	Température : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) Humidité relative : 15 % à 95 % HR Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa
Conditions de transport et de rangement :	Température : - 20 °C à 55 °C (- 4 °F à 131 °F) Humidité relative : 15 % à 95 % HR Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa
Indice de protection :	IP 27
Classification :	Type BF

	Courant continu		Code du lot
	Partie appliquée type BF		Fabricant
	Lire ce manuel / Consulter les instructions avant utilisation		Température limite d'entreposage et de transport : -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)

Cet appareil est conforme aux normes suivantes : IEC 60601-1-11:2015 Équipements électromédicaux — Partie 1-11 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles — Norme collatérale : Exigences pour les équipements électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement des soins à domicile; IEC 60601-1-2:2014 Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Perturbations électromagnétiques - Exigences et essais ; EN 60601-1:2006 Appareils électromédicaux. Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles (+A12:2014) ; ANSI/AAMI ES60601-1:2005 Equipement médical électrique, Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles. Le fabricant est certifié ISO 13485.

Garantie limitée

Le thermomètre AccuflexPro+® de Physio Logic® est garanti pendant un an à compter de la date d'achat. Si le thermomètre ne fonctionne pas correctement à cause de défauts de matériaux ou de fabrication, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Tous les composants sont couverts par cette garantie, à l'exception de la pile. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise manipulation de ce thermomètre. Pour bénéficier d'un service sous garantie, l'original ou une copie de la facture émis par le premier revendeur doit être présenté.